

裝填藥罐




按住安全扣(E)，拔下透明底座(G)。



將藥罐(H)推進吸入器底部，直到發出“卡嗒”聲。也可以放在桌面將藥罐輕壓裝入吸入器。



把透明底座(G)裝回去就完成囉!

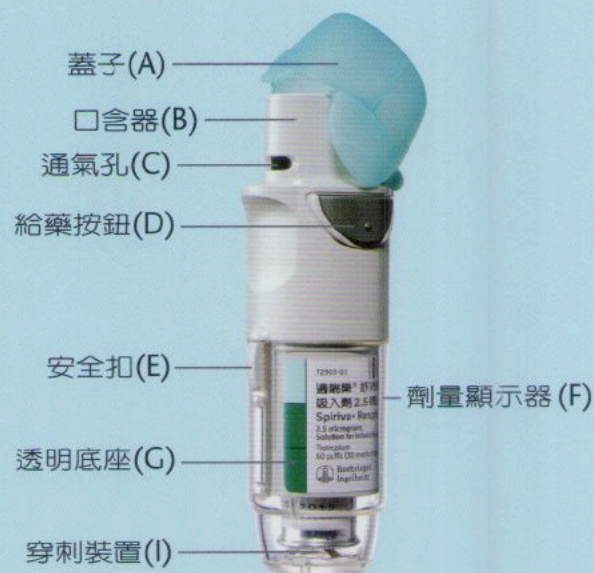

其他注意事項：

- 1：第一次裝填好藥瓶時，先試噴兩三次，看到有煙霧再開始使用。
- 2：每個適喘樂® 舒沛噴® 內含一個月的藥量。當指針進入紅色區域時，大約還剩7天的藥量。一旦指針到達紅色區域刻度的頂端，表示所有藥量全部用完。

吸入方式

適喘樂® 舒沛噴® 吸入器使用說明



將透明底座按照紅色箭頭方向旋轉，轉半圈後會有“卡嗒”一聲。



打開綠色蓋子。



含住口含器，按下給藥按鈕並同時慢慢地深吸氣，吸大約兩秒鐘。



吸完後盡量閉氣約10秒鐘，然後就可以恢復呼吸完成吸藥了。

記得接著重複 **轉開吸閉** 的步驟吸入第二個劑量才算完成一天的用藥喔！

____ 月份 每日用藥記錄

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31		

持續治療非常重要，請每月回醫院
拿取新的適喘樂® 舒沛噴®



SPIRIVA®
(tiotropium)



SPIRIVA® Respimat®

適喘樂®舒沛噴®吸入劑
衛署藥輸字第025033號
健保給付碼B025033161

詳細資料備索 僅供醫事人員參考使用

僅限獲適喘樂®舒沛噴®處方者使用
2013.09EP74-Spiriva

